
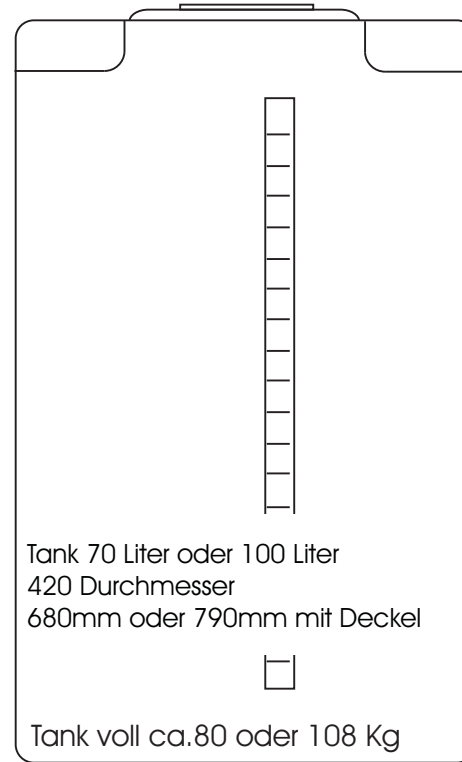


# Osmoseanlage mit Tank im Unterschrank

Für den Stadtwasseranschluß wird ein Wasserhahn (Waschmaschinenhahn) mit Rohrbelüfter benötigt


Osmose ca. 25Kg

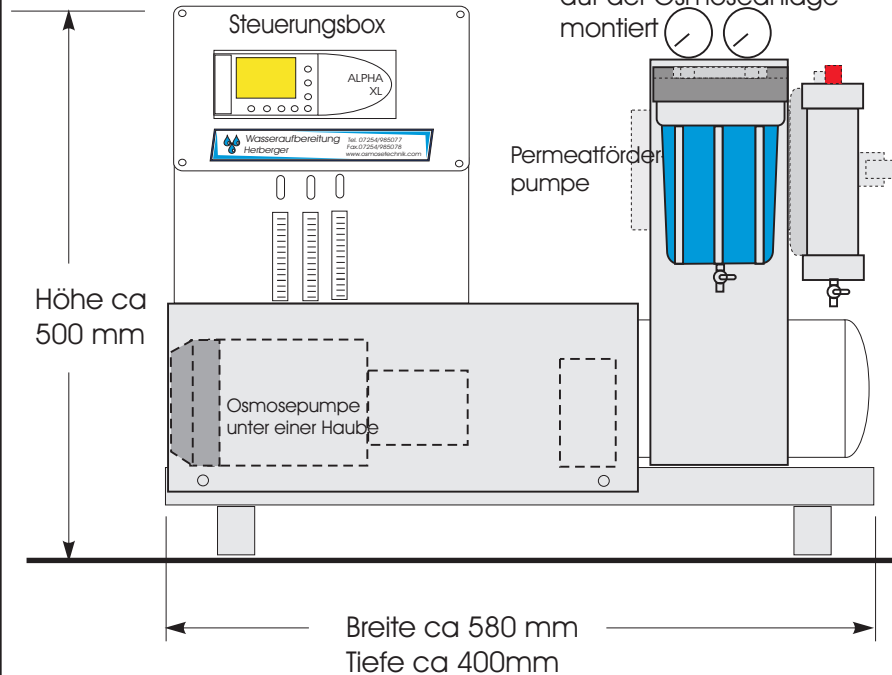

1 Schukodose wird benötigt  
Muss an gut zugänglicher Stelle sein.



Der Anschlussblock für das Osmosewasser mit Probe / Entnahmehahn, wird an die Versorgungsleitung angeschlossen.

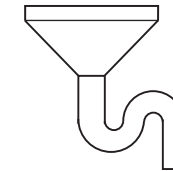

Abwassereinlauf  
Trichtersifon  
Oberkante max. 650mm hoch

Der Tank kann vor den Abwassertrichter gestellt werden.

Fußboden